



약통 디바이스 사용 설명서



약통 등록부터 사용 방법 까지 안내서

약통 설명서



제작

- 해당 약통은 PLA 소재로 만들어져 있습니다. 에탄올/알코올 성분에 닿지 않게 해주세요.
- 뚜껑 중앙에 자석 두 개, 통 중앙의 개폐 부위에 자석 한 개, 총 3개의 자석이 들어가 있습니다.
- 약통 양쪽의 안쪽 통 두 개는 분리 및 따로 세척이 가능합니다.

동작

- 표면 중앙에 있는 LED가 켜지거나 깜빡거리면 약 복용 알림이 왔다는 표시입니다.

- 알림 LED가 켜져 있을 동안 중앙의 검은 버튼을 누르면 알림이 꺼집니다.
알림이 온 직후 1분 동안은 LED 표시가 유지됩니다.
- 안쪽의 중앙 하단의 두 개의 파란색과 빨간색의 LED는 각각 전원 여부와 블루투스 연결 여부를 표시해 줍니다.
 - 파란색 불이 안 들어와 있을 경우 충전이 필요하거나, 전원이 켜지지 않은 경우입니다.
전원 스위치는 오른쪽 통을 분리하면 안쪽 보드 상단에 자리잡고 있습니다.
 - 빨간색 불은 알림이 울릴 경우에 블루투스 연결이 이루어졌다는 표시로 들어오게 되며, 알림을 껐는데도 빨간 불이 계속 켜져있다면 앱에서 백그라운드로 실행 중인 어플을 종료해 주시길 바랍니다.
- 안쪽의 초록 LED는 어플의 약통 기기 페이지에서 사전 설정한, 복용해야 할 약의 칸을 표시해 줍니다.
- 뚜껑을 닫으면 안쪽의 LED들은 개폐 인식 장치로 인해 자동으로 꺼지고, 뚜껑을 열면 켜집니다.

충전

- C타입 충전기로 충전이 가능합니다.

약통 앱 연동 설명서

1. 권한 허용

원활한 약통 사용을 위해 다음의 권한 허용이 필요합니다.

- 근처 기기
- 위치 정보

해당 버튼을 누르면 권한 허용을 요청하는 팝업에서 권한을 허용해 주시면 됩니다.

앱 권한을 허용해 주세요.

권한 허용

권한을 거부하거나 아직 허용해야 하는 권한이 존재한다면 위의 버튼을 다시 눌러 허용을 진행할 수 있습니다.

2. 블루투스 켜기


약통과 앱은 블루투스를 사용하여 연동됩니다. 해당 버튼을 누르면 블루투스가 켜집니다.



약통 등록과 추후 사용 시, 블루투스가 필수적으로 켜져있는 상태여야 하므로, 반드시 켜주시기 바랍니다.


3. 근처 약통 디바이스 찾기

처음 어플을 다운 받으면 약통이 아직 등록되지 않은 상태로, 아래의 화면처럼 나타날 것입니다

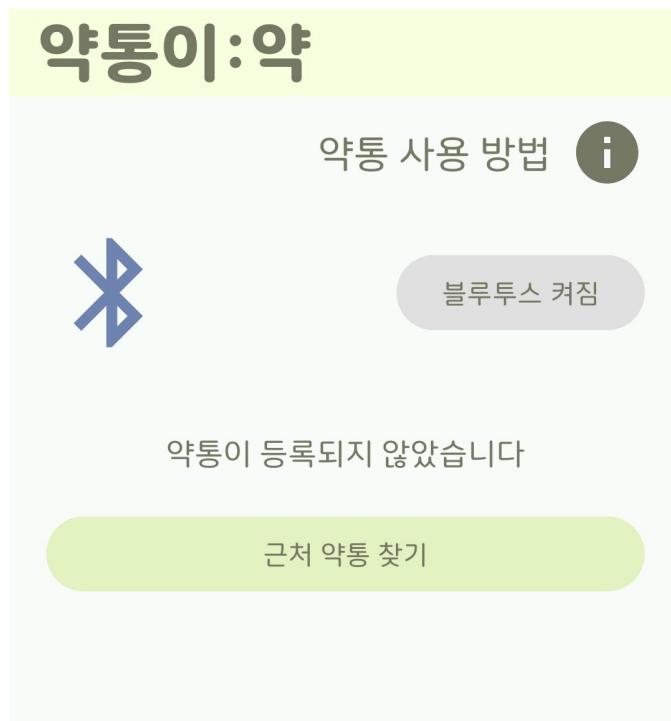


여기서 '근처 약통 찾기' 버튼을 눌러 약 12초 동안 근처의 약통 블루투스 기기를 찾아 화면에 띄워줍니다.

본인의 시리얼 넘버에 맞는 약통을 찾아 연결하세요.

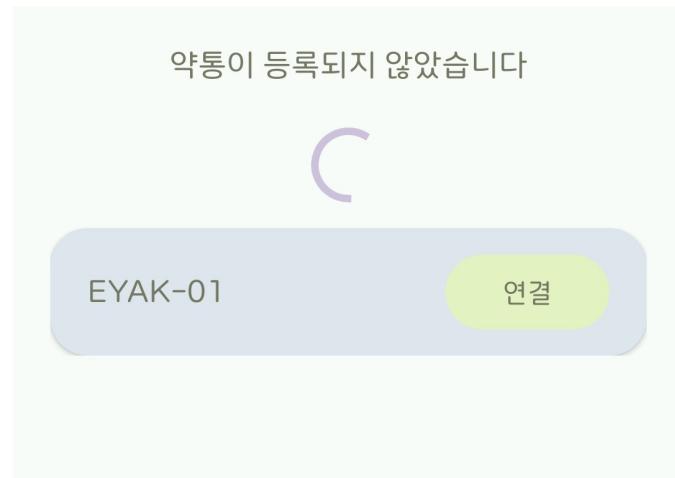

약통의 블루투스 기기를 등록하겠습니까 하는 안내문에서 '등록'을 눌러주세요.

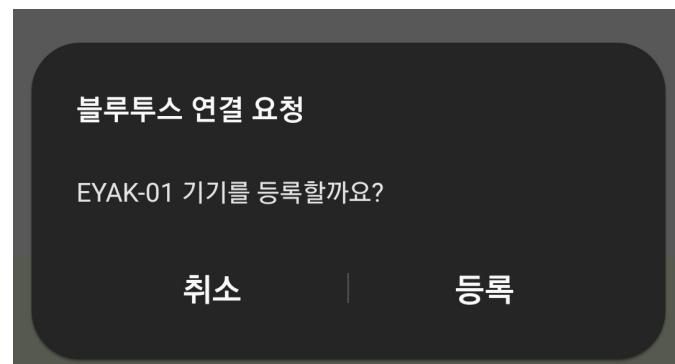


등록까지 완료되면 아래 화면처럼 뜰 것입니다.



4. 약통 정보 한눈에 보기

해당 동그라미 아이콘과 상태 메시지로 약통의 등록 여부를 알 수 있습니다.

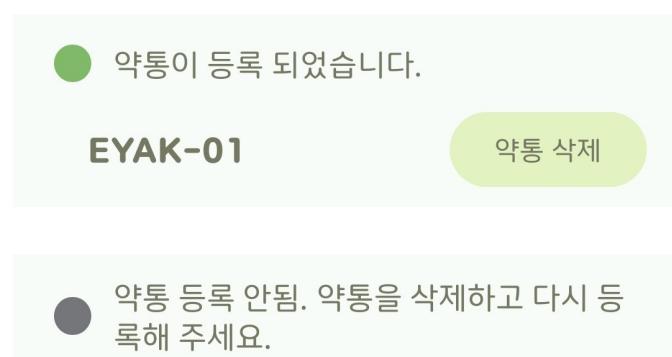

만일 약통과 연결이 끊어졌다는 메시지가 올라올 경우 약통을 삭제하고 다시 등록할 수 있습니다.

또한, 다른 약통을 사용하고 싶은 경우 기존에 등록된 약통을 삭제하고 다시 등록할 수 있습니다.



또한, 화면의 약 아이콘을 클릭하여 해당 약의 이름을 확인할 수 있습니다.

5. 약통 편집하기

위에서 '약통 편집하기' 버튼을 눌러 약통의 약 배치 상태를 변경할 수 있는 설정 페이지로 이동할 수 있습니다.

본인의 가호에 따라 배치하고 싶은 약 아이콘을 손가락으로 길게 누르고 끌어서 배치해 보세요.

약통 하단의 파란 부분에 약 아이콘을 다시 끌어 배치를 취소할 수 있습니다.

약 아이콘을 클릭하면 해당 약의 이름을 상단에 나타내 줍니다.



또한, 이 페이지에서 약통의 알림 방식을 설정할 수 있습니다.

마지막에 반드시 '저장하기'를 눌러, 편집 정보를 저장해 주세요!

